

# STP

## SUPER TILT PLUS

TILT WHEELCHAIR



**ADP CODE:** WM0001040

**AADL CODE:** W304

L'un des fauteuils les plus vendus de Power Plus Mobility. Le STP est un fauteuil inclinable léger conçu pour le réglage et la maniabilité. Le système d'inclinaison STP permet un changement d'orientation pour redistribuer la pression d'une zone à une autre.




--- Inclinaison jusqu'à 55° ---



**Option d'inclinaison électrique**



Pivot central pivotant dans le gréement avant

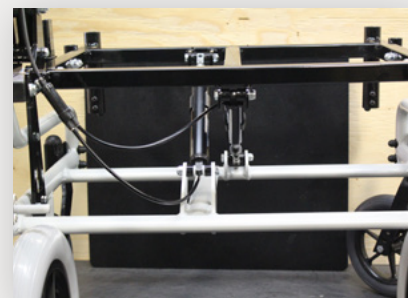

Les doubles cylindres permettent une inclinaison constante pour toutes les capacités de poids



Configuration étroite  
(Montage de la roue intérieure)



Réglage de l'essieu arrière



Réglage de l'essieu arrière

## À PROPOS DE STP

L'un des fauteuils les plus vendus de Power Plus Mobility. Le STP est conçu pour le réglage et la maniabilité, le confort étant un autre point majeur de cette conception, notre STP sera votre choix pour les fauteuils roulants inclinables et vous garantira attentes. Le STP offre un large éventail de dynamiques qui permettent à ce fauteuil roulant de s'adapter à de nombreuses situations différentes, garantissant un ajustement parfait pour tous, même dans les positions les plus difficiles.

## PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un dessin. échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriqués en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications

**STP**  
SUPER TILT PLUS

 **POWER PLUS MOBILITY**  
OUR PRODUCTS WILL MOVE YOU

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Cadre léger
- Profondeur Réglable
- Assise en ABS
- Entretoises doubles pour une inclinaison facile (jusqu'à 55 °)
- Serrure à collier inclinable, verrouillée à 33 °
- Nouveau cadre inférieur encastré pour la propulsion du pied
- Cylindres à double gaz pour un basculement facile et en douceur
- Mécanisme de libération de bouteille de gaz Soft Set
- Couleur du cadre gris argenté ou noir
- Bras de style t
- Poignée de poussette réglable
- Repose-pieds pivotant
- Journaux réglables
- Plaques d'essieu encastrées
- Largeur hors tout du fauteuil roulant: 28 "(largeur de siège 18")

CARACTÉRISTIQUES	STP
LARGEUR DE SIÈGE:	14" TO 36"
PROFONDEUR DU SIÈGE:	16" TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE:	(RÉGLABLE): 12.25" TO 18.25"
ANGLE D'INCLINAISON:	0° TO 55°
ANGLE DU DOS:	(RÉGLABLE): 0° , 5° , 10° OR 15°
POIGNÉE DE POUSSETTE RÉGLABLE:	0° TO 180°
CAPACITÉ DE POIDS:	UP TO 600 lbs.
POIDS DE LA PRÉSIDENTE:	60 lbs. (ENVIRON)
	MACHOIRE DE GAZ À BLOCAGE DEUX VOIES
	LIBÉRATION SIMPLE, DOUBLE CYLINDRE
	COLLIERS DE VERROUILLAGE STANDARD (33 °)

**STP**  
TILT WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en  
scannant le code QR